
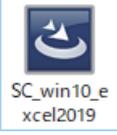
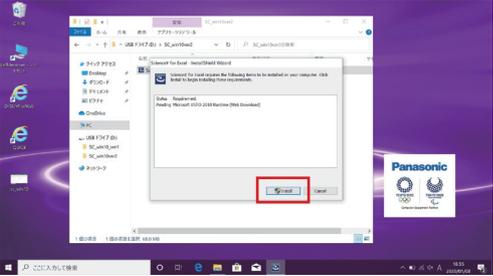
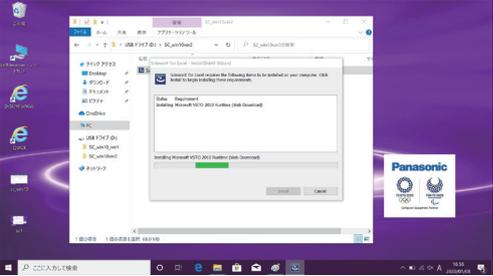
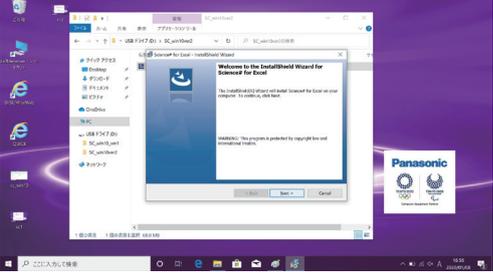
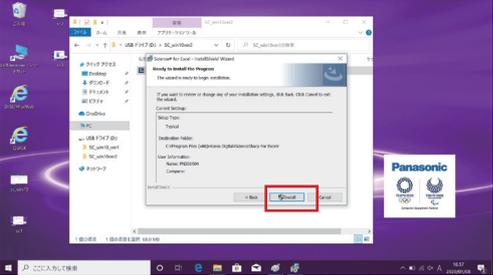
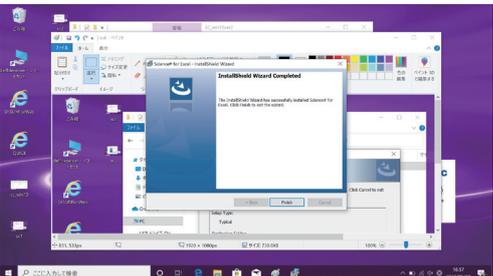



# Windows10 & Excel2019 への対応について

Windows10（64bit版） & Microsoft Excel 2019 でサイエンスキューブを使用するためのソフトです。画面に従い、インストールしてください。

	<p>Windows10&amp;Excel 2019 に対応するソフトウェアをダウンロードします。 ファイル名：<b>SC_win10_excel2019</b></p>
	<p>画面に従って、インストールを進めてください。</p>
	
	
	
	

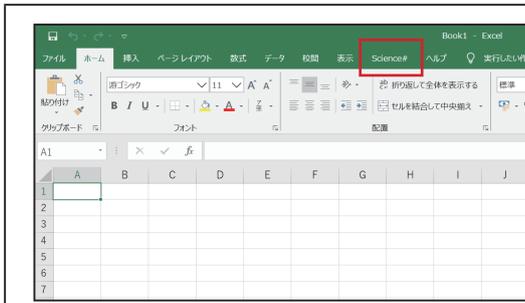


インストールが完了すると、Excel の画面に【Science#】というコマンドが追加されます。これでインストールが完了します。必要に応じて、表示言語の設定を行ってください。

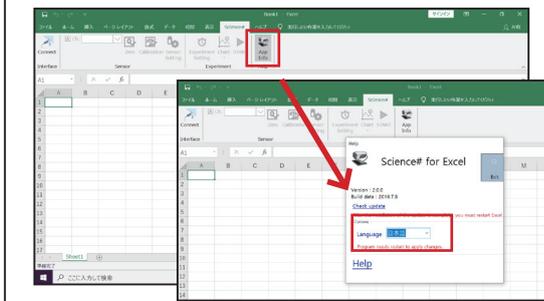


### 表示言語の設定

- ① 【App info】 をクリックします。
- ② Language を日本語に設定し、Excel を再起動します。

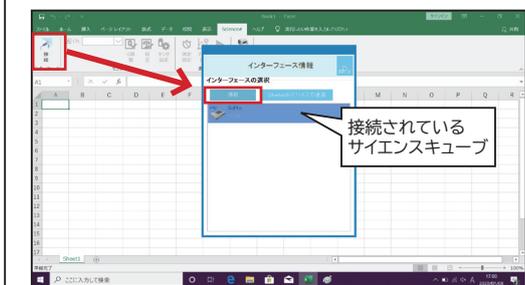


### サイエンスキューブの接続方法

- ①接続 を選択します。
- ②しばらくすると、接続されているサイエンスキューブが認識され、表示されます。
- ③【接続】をクリックすると、パソコンとの接続が完了します。

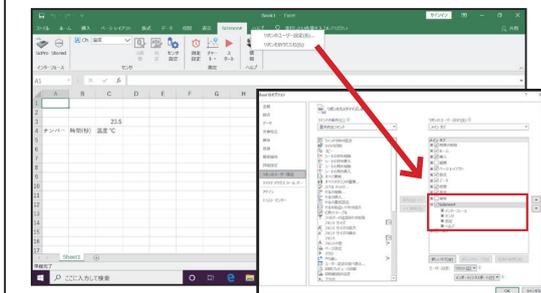

### Excel 上の Science# を消す ※一時的に表示させない方法

- ① Science# のコマンドの上で、右クリックします。
- ②リボンのユーザー設定 (R) を選択します。
- ③メインタブ内の Science# のチェックマークを外します。
- ④ OK を選択します。

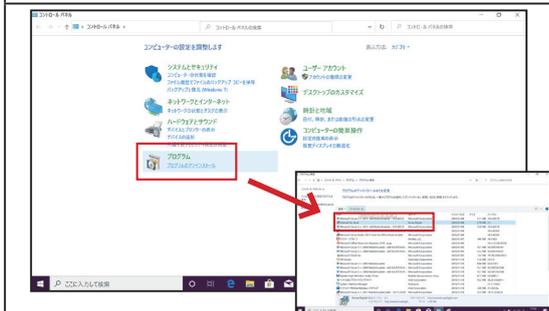

### Science# のアンインストール方法

- ①コントロールパネル内のプログラムのアンインストールを選択します。
- ②プログラムと機能を選択します。
- ③プログラムのアンインストールまたは変更の画面から Science# for Excel を選択し、アンインストールします。